

ELISA试剂盒使用说明书

Human IL-36 γ /IL-1F9 ELISA Kit

本试剂盒用于定量检测人血清、血浆或细胞培养上清液等样本中天然和重组IL-36 γ /IL-1F9浓度。使用前请仔细阅读说明书并检查试剂组分，如有任何疑问请与合肥兰杰柯科技有限公司联系，公司将为您提供强有力的技术支持。



全国统一热线：400-600-4213
www.biosharp.cn

目 录

一、产品简介	2
二、检测原理	2
三、试剂盒组分	3
四、储存条件	3
五、注意事项	3
六、其它实验材料	4
七、使用说明	4
7.1、样品收集、处理及保存方法	4
7.2、试剂准备	4
7.3、操作步骤	5
7.4、操作流程圖	6
7.5、操作要点提示	6
7.6、结果判断	6
八、常见问题分析及解决	8

Human IL-36 γ/IL-1F9 (白细胞介素36 γ) ELISA KIT

货号	名称	规格
BSEH-301-48T	Human IL-36 γ/IL-1F9 (白细胞介素36 γ) ELISA KIT	48T
BSEH-301-96T	Human IL-36 γ/IL-1F9 (白细胞介素36 γ) ELISA KIT	96T

一、产品简介

IL-36 (白细胞介素-36) 是新的促炎细胞因子。可由单核细胞、T淋巴细胞、角质细胞等多种细胞产生。由3个生物学功能相似的分子IL-36α、IL-36β、IL-36γ组成, 归属Th2型细胞因子。人类IL-36基因存在于2号染色体上, 由12条β管状线组成, 含有β-三叶草二级结构, 其结构模型和经典的IL-1家族相似。

IL-36α, IL-36β和IL-36γ通过IL-1Rrp2和IL-1RAcP激活NF-κB和丝裂原激活蛋白激酶(MAPK)途径产生大量的细胞因子、趋化因子、黏附分子和酶等炎症介质, 进而介导炎症反应, 参与慢性炎症和自身免疫性疾病的病理生理过程, 特别是与银屑病的关系密切。

IL-36为IL-1家族成员, 与IL-1F其他成员IL-1A、IL-1B和IL-1RN一样位于2号染色体上一段400kb区域上, 并且编码IL-36的基因与编码IL-1Ra和IL-38的基因很接近。IL-36与IL-1F其他成员的同源性为13%~56%。IL-36可由多种细胞产生, 其中, IL-36α在气管、胸腺、胎儿结肠和脾组织中及小鼠胃组织中表达; IL-36β在人胎儿结肠和骨骼肌中表达; IL-36γ在人子宫和气管组织中低表达, 而在大鼠组织和细胞如趾、食管、胃、骨髓和外周血淋巴细胞等中高表达。


IL-36的结构与其他典型的IL-1F成员相似, 都有一个疏水核心和β-三叶草结构, 并且都缺少一个信号肽 (IL-1F成员的经典特征) 和胱天酶1切割位点。N端切除的IL-36α, IL-36β和IL-36γ的活性比N端未切除的这些细胞因子的活性增强1000~10000倍, 并且IL-36Ra的拮抗活性取决于其N端蛋氨酸的去除。IL-36Ra从Val-2开始具有完全的拮抗剂活性, 它不仅能抑制IL-36γ也能抑制IL-36α和IL-36β, 其Val-2位于所有IL-1F成员N端的一个共有的A-X-Asp保守重复的第9个氨基酸。

IL-36成员是树突细胞和T细胞的强效调节剂, 在免疫调理及免疫激活作用中参与树突细胞与Th细胞的激活、抗原呈上和刺激促炎因子产生。IL-36α和IL-36β能够诱导促炎介质TNF-α、IL-17的产生, 而TNF-α、IL-17和IL-22又能够诱导IL-36的产生, INF-γ选择性诱导IL-36β的产生, IL-36与Th17之间相互调节。IL-36γ和IL-12具有协同刺激CD8+T淋巴细胞的作用, 增强其细胞因子分泌功能。此外, IL-36γ可以作为免疫佐剂以诱导增强病毒特异性的CD4+T和CD8+T细胞应答, 并可促进肿瘤坏死因子和INF-γ的产生。

IL-36诱导细胞死亡及caspase-3/7的激活, 然而, IL-36基因的转录依赖的是caspase-1, 而不是caspase-3/7的激活, 当出现IL-36γ时可能意味着病毒感染、细胞死亡。在小鼠中, 编码IL-36γ的基因靠近过敏原诱导支气管高反应基因座位。有研究报道, 哮喘小鼠肺中IL-36γ的表达较正常小鼠明显增高, IL-36γ可能参与小鼠肺部炎症的发病机制。另有报道显示, 给小鼠气管内注射10μg IL-36γ, 会导致中性粒细胞浸润, IL-36γ能够对中性粒细胞炎症进行调节。有研究证实细胞因子IL-36γ在肠道炎症反应中有助于缓解炎症反应并促进伤口愈合。

二、检测原理

本实验采用双抗体夹心ELISA。用抗人IL-36γ/IL-1F9单克隆抗体预包被酶标板, 加入适度稀释的样本和标准品, 其中的IL-36γ/IL-1F9会与其单抗结合, 洗去游离成分; 加入生物素化的抗人IL-36γ/IL-1F9抗体, 抗人IL-36γ/IL-1F9抗体与结合在单抗上的人IL-36γ/IL-1F9结合而形成免疫复合物, 洗去游离的成分; 加入辣根过氧化物酶标记的亲合素, 生物素与亲合素特异性结合, 洗去未结合的酶结合物; 加入显色剂, 若反应孔中有IL-36γ/IL-1F9, 辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色; 加终止液变黄。在450nm下测OD值, IL-36γ/IL-1F9浓度与OD₄₅₀值之间呈正比, 可通过绘制标准曲线计算出标本中IL-36 γ/IL-1F9浓度。

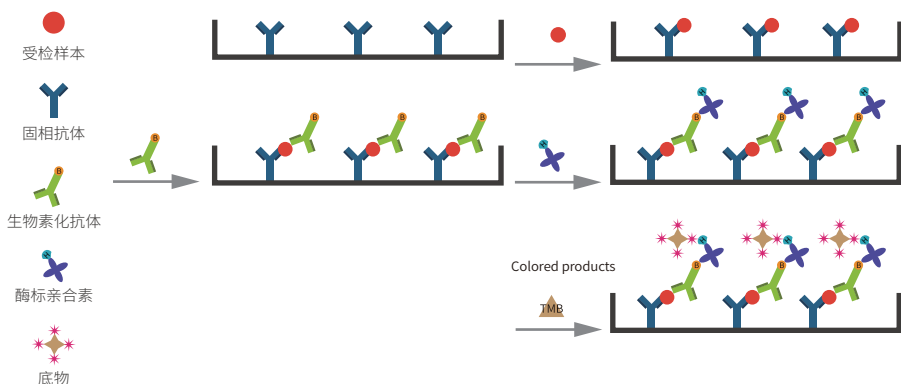

三、试剂盒组成

组分编号	组分	96t	48t	储存条件
BSEH-301-1	标准品	2支	1支	-20℃
BSEH-301-2	标准品和标本稀释液	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-301-3	浓缩生物素化抗体	2支	1支	2-8℃
BSEH-301-4	生物素化抗体稀释液	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-301-5	浓缩酶结合物(避光)	2支	1支	2-8℃
BSEH-301-6	酶结合物稀释液	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-301-7	浓缩洗涤液 20×	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-301-8	显色剂(避光)	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-301-9	终止液	1瓶	1瓶	2-8℃
BSEH-301-10	抗体包被板条	8×12	8×6	2-8℃
BSEH-301-11	封板胶纸	4张	2张	2-8℃
	说明书	1份	1份	

四、储存条件

未开封试剂盒2-8℃保存有效期6个月, 启封后建议一个月内使用完毕。产品收到后标准品-20℃保存, 其它组分2-8℃保存。

五、注意事项

- 1、试剂盒保存在2-8℃, 除复溶后的标准品, 其它成分不可冷冻。
- 2、浓缩生物素化抗体、浓缩酶结合物装量极少, 运输中颠簸和可能的倒置会使液体沾到管壁或瓶盖。使用前请离心处理以使附着于管壁或瓶盖的液体沉积到管底。
- 3、不同批号试剂不可混用。
- 4、为避免交叉污染请使用一次性吸头。
- 5、终止液和显色剂具腐蚀性, 避免皮肤及粘膜直接接触, 一旦接触到这些液体, 请尽快用大量水冲洗。
- 6、使用干净的塑料容器配制洗涤液, 使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
- 7、洗涤酶标板时应充分拍干, 不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。
- 8、不要用其它来源的试剂混合或替代该产品的组分, 不同批号的试剂盒组份不能混用, 请在有效期内使用本产品。
- 9、在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔, 加入试剂的顺序应一致, 以保证所有反应孔孵育的时间一样。

10. 充分混匀对反应结果尤为重要, 最好使用微量振荡器(使用最低频率进行振荡)。
11. 避免操作过程中酶标板干燥, 干燥会使酶标板上生物成分迅速失活, 影响实验结果。
12. 适当的稀释样品, 使样品值落在标准曲线范围内, 根据待测因子含量高、中、低的不同, 建议采用1:100、1:10、1:2稀释样品。如果样品OD值高于最高标准, 适当增加稀释度并重复检测。
13. 标准品稀释液, 操作人, 移液方式, 洗涤方法, 孵育时间及温度, 试剂盒批次的不同均可能会导致结果的差异。
14. 此法可有效的消除可溶性受体、结合蛋白以及生物样品中的其他因素的干扰。

六、其它实验材料

1. 酶标仪(450 nm)
2. 高精度可调移液器及吸头: 0.5-10, 2-20, 20-200, 200-1000 μL ; 一次检测样品较多时, 最好用多通道移液器
3. 自动洗板机或洗瓶
4. 37°C温箱
5. 双蒸水或去离子水
6. 坐标纸
7. 量筒


七、使用说明

7.1 样品收集、处理及保存方法

1. 血清: 使用不含热原和内毒素的试管, 收集血液后, 室温凝血30min, 1000 $\times$ g离心10min, 小心分离血清。
 2. 血浆: 用EDTA、柠檬酸盐、肝素作为抗凝剂收集血浆, 收集后30min内以1000 $\times$ g离心15min去除颗粒。
 3. 细胞上清液: 1000 $\times$ g离心10min去除颗粒和聚合物。
 4. 保存: 若样品不立即检测, 请将其按一次用量分装, -20°C~-70°C保存, 避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高脂样品。如果血清中含有大量颗粒, 检测前先离心或过滤去除; 室温下解冻, 请勿于37°C或更高的温度加热解冻。
 5. 稀释: 可根据实际情况, 将标本做适当倍数稀释(建议做预实验, 以确定稀释倍数)。
- 注: 正常人血清或血浆样本建议做1:2稀释。

7.2 试剂准备

1. 提前30 min从冰箱中取出试剂盒, 平衡至室温。
2. 洗涤缓冲液: 从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶, 这属于正常现象, 加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:20)。未用完的放回4°C。
3. 标准品: 按照标签提示加入标准品稀释液至冻干标准品中, 静置15分钟, 待彻底溶解后混匀 (浓度为2000 $\mu\text{g/mL}$), 然后根据需要进行稀释, 见下图(建议标准曲线使用以下浓度: 2000、1000、500、250、125、62.5、31.25、0 $\mu\text{g/mL}$)。稀释的标准品不得重复使用, 未用完的标准品应按照一次用量分装后, 将其放在-20~-70°C贮存, 一次性使用, 避免反复冻融。

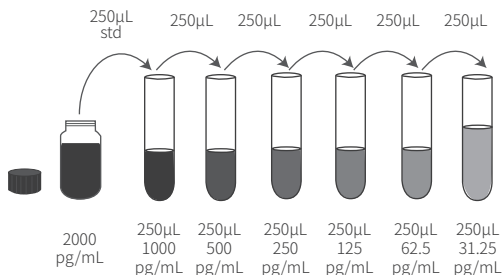

标准品稀释方法

4、生物素化抗体工作液：根据每孔需要100μL来计算总的用量，多配制100-200μL。以生物素化抗体稀释液稀释浓缩生物素化抗体(1:100)。最好现用现配。

浓缩生物素化抗体稀释方法

所用板条数	浓缩生物素化抗体	+	生物素化抗体稀释液
12	110μL	+	10890μL
10	90μL	+	8910μL
8	70μL	+	6930μL
6	50μL	+	4950μL
4	33μL	+	3267μL
2	17μL	+	1683μL
1	9μL	+	891μL

5、酶结合物工作液：以酶结合物稀释液稀释浓缩酶结合物(1:100)。最好现用现配。


浓缩酶结合物稀释方法

所用板条数	浓缩酶结合物	+	酶结合物稀释液
12	110μL	+	10890μL
10	90μL	+	8910μL
8	70μL	+	6930μL
6	50μL	+	4950μL
4	33μL	+	3267μL
2	17μL	+	1683μL
1	9μL	+	891μL

7.3 操作步骤

- 1.按照上述准备工作配制好各种溶液。
- 2.根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数，并增加1孔作为空白对照孔。分别将标本和不同浓度标准品(100μL/孔)加入相应孔中(零孔只加标准品/样本稀释液)，用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育90分钟(空白对照孔除外)。
- 3.洗板4次：(1)自动洗板机：要求注入的洗涤液为350 μL，注入与吸出间隔15-30秒。(2)手工洗板：甩尽孔内液体，每孔加洗涤液350 μL，静置30秒后甩尽液体，在厚迭吸水纸上拍干。
- 4.加入生物素化抗体工作液(100μL /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育60分钟(空白对照孔除外)。
- 5.洗板4次。
- 6.加入酶结合物工作液(100μL /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育30分钟(空白对照孔除外)。
- 7.洗板4次。
- 8.加入显色剂100μL/孔，避光，37℃孵箱孵育10-20分钟。
- 9.加入终止液100μL/孔，混匀后即刻测量OD₄₅₀值(5分钟内)。

7.4 操作流程图

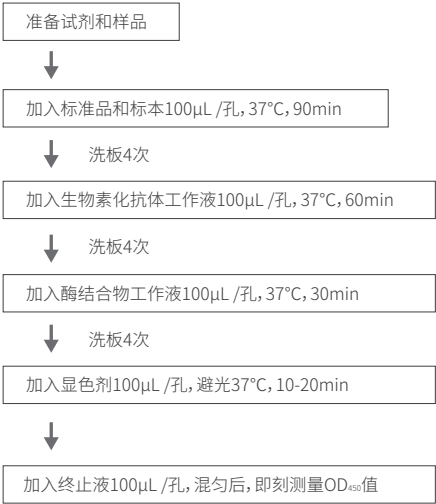

7.5 操作要点提示

- 1.配制各种试剂时要充分混匀,但要避免产生大量泡沫,以免加样时加入大量的气泡,产生加样误差。
- 2.为避免交叉污染,在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。
- 3.为了确保准确的结果,在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。
- 4.显色剂在添加之前,应保持无色,请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要,肉眼可见前3-4孔有梯度蓝色,后3-4孔差别不明显,零孔无蓝色出现即可终止。
- 5.每次检测均要做标准曲线,根据样品待测因子的含量,适当稀释或浓缩样本,最好做预实验。

7.6 结果判断

- 1.每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值,如果做复孔,求其平均值。
- 2.使用计算机软件以吸光度OD值为纵坐标(Y),相应的IL-36γ/IL-1F9标准品浓度为横坐标(X),生成相应的标准曲线,样品的IL-36γ/IL-1F9含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。
- 3.若标本OD值高于标准曲线上限,应适当稀释后重测,计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。
- 4.参考数据

标准品浓度(pg/mL)	OD值1	OD值2	平均值	矫正值
0	0.089	0.090	0.09	—
31.25	0.143	0.145	0.144	0.054
62.5	0.196	0.200	0.198	0.108
125	0.237	0.229	0.233	0.143
250	0.396	0.393	0.395	0.305
500	0.696	0.671	0.684	0.595
1000	1.382	1.391	1.387	1.297
2000	2.812	2.814	2.813	2.723

八、常见问题分析及解决

问题	可能原因	解决办法
无颜色	不同试剂盒或不同批号的试剂混合	重新检查试剂的标签, 确保所有组分都属于正使用的试剂盒中的。不能混用不同试剂盒或不同批号的试剂。
	漏加酶	检查操作流程, 注意不要漏加
	HRP酶污染了叠氮钠	使用新配制的试剂, 禁含叠氮钠
显色弱	试剂配制/使用有误	重做试验, 严格按说明书操作, 每次配试剂和使用前看清标签
	超过有效期的产品可能会产生很弱的信号	检查产品有效期
	缩短孵育时间能使实验信号变弱	检查孵育时间
	使用了被污染的试剂	检查试剂是否被污染
	仪器设定不正确, 滤光片不匹配	仪器是否设定正确, 滤光片的使用等
	洗涤操作不规范	洗涤不充分, 使用手工洗板管出现
		洗瓶洗涤, 每孔应完全充满洗涤缓冲液, 倾出时应迅速
		若用洗板机, 应校准并设定足够充满每孔的体积量, 板内侧不应接触设备
		检查每孔是否有残留的洗涤液或每孔加样量的体积是否准确 可在两次洗板之间加30秒的浸泡
高背景	实验中孵育温度和时间不当	确定每一试验步骤的孵育温度和时间是否适当
	酶加量过多	加酶前验看移液器调节量是否准确
		检查稀释度, 若必要进行效价测定
全部板子变成规则的蓝色	不充分的洗涤/洗涤步骤被遗漏使没结合的HRP仍有残留	最好使用洗板机充分洗涤 检查每孔是否有残留的洗涤液或加样量是否准确
	太多的酶结合物	检查稀释度, 必要时进行效价测定
	封板膜或试剂容器被重复使用, 导致HRP残留, 使TMB底物产生非特异蓝色	使用新封板膜, 每步使用不同的试剂容器
高CV值花板	操作不慎或洗涤不充分	按说明书洗板、加样和显色, 洗板尤为重要
	出现干板, 没有使用封板膜、封板膜重复使用	确定每两步骤间酶标板应保持湿润 使用封板膜封口, 注意每步使用新鲜的封板膜
	移液器不准确, 吸头重复使用	检查并校准移液器, 每次取样必须更换吸头
标准曲线可得到, 但两点之间区别很差(低或平的曲线)	酶结合物不足	检查稀释度, 必要时进行效价测定
	检测抗体不足	检查稀释度, 必要时进行效价测定
	板子显色不足	延长底物孵育时间
		使用推荐品牌的底物溶液
标准曲线很好, 但没有任何期望的阳性信号	标本中无相应的待检测物质	使用内参对照
	标本基质遮盖检测	重复实验, 重新考虑实验的相应参数
		将标本至少做1:2相应的稀释, 或进行系列稀释
标准曲线很好, 但标本的判读值很高	标本中含的待检物质水平超过实验范围	稀释标本
边缘效应	工作环境温度不均衡	避免将板子在变化温度环境中孵育
	实验过程中出现间断	整个实验应连续操作, 在实验开始前将所有的标准品和标本做适当的准备。
	试剂没有按说明书平衡至室温	在所有试剂加入孔前, 确保它们已平衡至室温, 除非说明书中有另外的要求。
	是否可更改试剂盒所提供的操作步骤?	一般厂商为确保最高的灵敏度, 对试剂盒都进行了优化, 为确保每一试剂盒实验的规范性应按说明书操作。
漂移	是否可混用不同批次试剂盒中的试剂?	不可以, 绝大多数试剂在每批试剂盒中是特异的, 若有问题可与厂家或代理商联系。
	是否可增加或减少标本的体积?	商品化的试剂盒所需加入的标本体积是优化的, 应按说明书操作, 不建议更改所加标本体积。
	是否可重新确定自己的标准曲线的点?	可以。说明书上有建议制备标准曲线时标准品的稀释度, 可改变稀释倍数和增加曲线的点, 但是必须在实验范围内, 高于试剂盒中最高标准品的点和低于灵敏度以下的点是无效的。

实际加样情况表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12